

# NOUVEAUTÉS 2026



Med  
Au cœur  
de la vie  
saine

## BORT DorsoXpress

Une série. Six orthèses modulaires. De nombreuses possibilités.



6-5



4-3



2



1

### BORT X-Walker AIR

Gamme d'orthèses avec coussin d'air de grande surface pour la région de la jambe inférieure et du pied



### BORT Night Splint

Attelle dorsale de stabilisation avec dispositif antibasculement latéral



### BORT GenuXpress/ACL

Orthèses de genou avec articulation à courbe polaire BORT : désormais encore plus faciles à manipuler



**BORT. L'extra à votre côté.**

**NOUVEAU**

# BORT DorsoXpress

Série d'orthèses dorsales modulaires pour le traitement d'un large éventail d'indications

Avec DorsoXpress 1-6, BORT propose une série d'orthèses dorsales constituée de six éléments avec possibilité de démontage pour le traitement des pathologies orthopédiques dans la zone de la colonne thoracique et lombaire.

## La BORT DorsoXpress rend les choses faciles

- ⊕ Bandage de base de la série en taille universelle (réglable)
- ⊕ Tous les modèles d'orthèses sont conçus de manière identique en termes de manipulation.
- ⊕ Poids propre faible.
- ⊕ Ouverture et fermeture faciles
- ⊕ Aide à l'ajustement pour faciliter l'adaptation à la taille

## La BORT DorsoXpress favorise la réussite du traitement


Meilleure qualité des soins, patientes et patients satisfait(e)s, observance thérapeutique élevée.

## MATÉRIAU HAUTE PERFORMANCE

- Grande élasticité
- Incassable, résistant aux chocs et à l'abrasion
- Faible poids propre

## CONCEPTION HEXAGONALE INNOVANTE

- Augmente la stabilité et la flexibilité
- Réduit le poids et permet la circulation de l'air

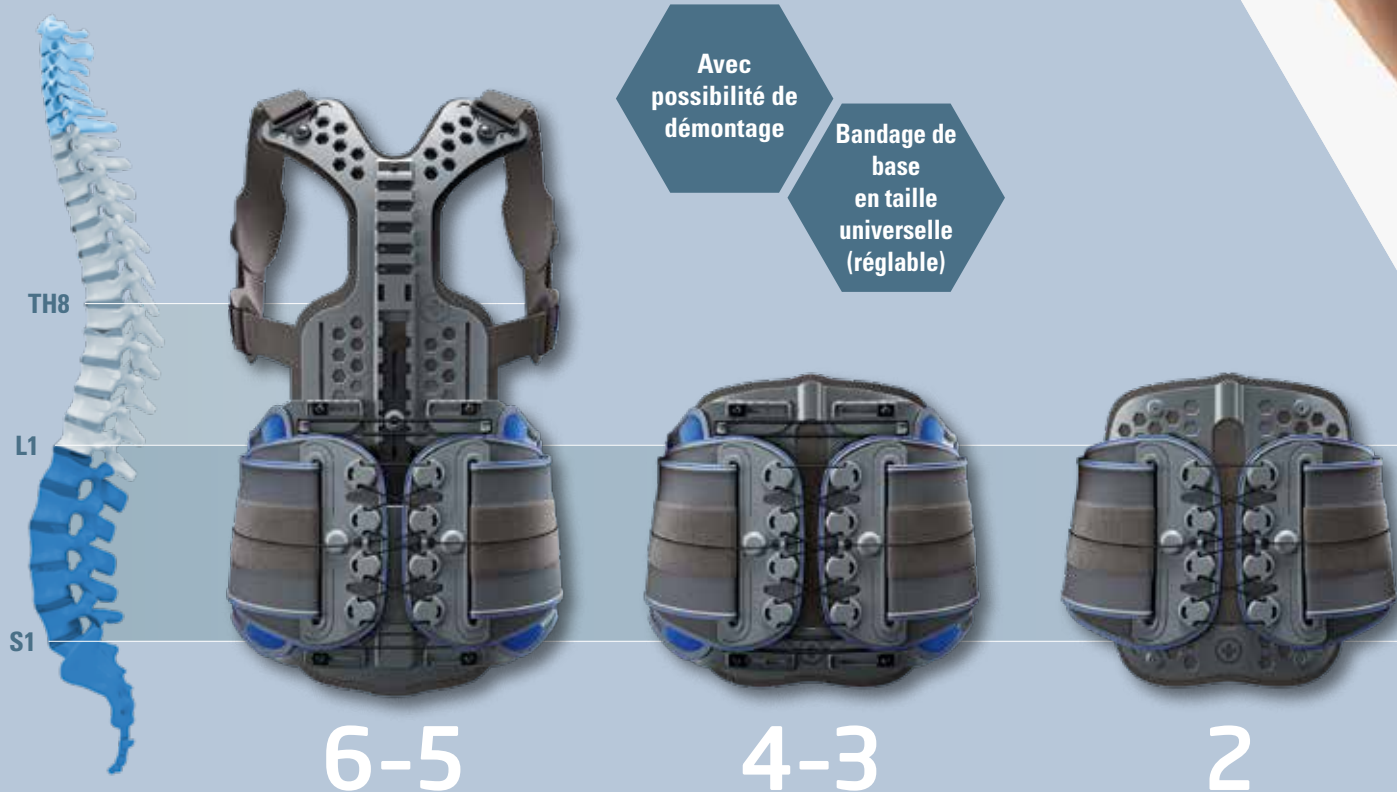

Très bonne  
adaptation individuelle -  
rapide et simple



#### TIGES DE STABILISATION EN ALUMINIUM FORMABLES À FROID


- Adaptation des éléments de pontage lombaire et de rallonge thoracique

#### CORBEILLE PELVIENNE RÉGLABLE EN FONCTION DE LA TAILLE

- Avec zones périphériques partiellement flexibles pour soulager les structures anatomiques critiques

#### SYSTÈME DE PALAN

- Pour une mise en place demandant peu d'efforts et un ajustement parfait

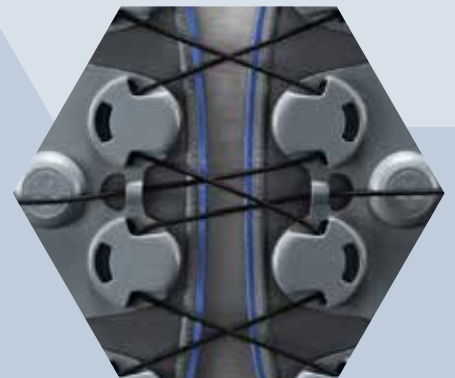

L'illustration montre BORT DorsoXpress 5 ou 6.



1

XPRESS

**NOUVEAU**

# BORT DorsoXpress 1-6

Structure modulaire. Démontable au cours du traitement.

## DX 6

REF 180660  
Pos.No.  
23.10.01.00.1



Orthèse vertébrale servant à soulager et corriger la colonne lombaire et thoracique ainsi que les restrictions de mouvement dans le plan sagittal/frontal avec fonction de mobilisation

Comme BORT DorsoXpress 5, avec en plus :

- Élément dorsal supérieur pour une mobilisation fonctionnelle
- Démontable uniquement à l'aide du kit de démontage supplémentaire pour obtenir BORT DorsoXpress 4-2

COULEUR: ■ gris

## DX 5

REF 180650  
Pos.No.  
23.10.01.00.1



Orthèse vertébrale servant à soulager et corriger la colonne lombaire et thoracique ainsi que les restrictions de mouvement dans le plan sagittal/frontal

- Élément de pontage et de rallonge de la colonne lombaire/thoracique, formable à froid de manière anatomique
- Corbeille pelvienne, réglable en fonction de la taille
- Hauteur : côté ventre 16 cm
- Hauteur : dorsale courte min. 45 – max. 54 cm / longue min. 53 – max. 62 cm
- Démontable uniquement à l'aide du kit de démontage supplémentaire pour obtenir BORT DorsoXpress 4-2

COULEUR: ■ gris

## DX 4

REF 180640  
Pos.No.  
23.10.01.00.1



Orthèse de flexion servant à soulager et délordoser la colonne lombaire avec fonction de mobilisation

- Hauteur : côté ventre 21 cm, côté dos 27 cm

Comme BORT DorsoXpress 3, avec en plus :

- Plaque abdominale pour renforcer la pression
- Le retrait de la plaque abdominale permet d'obtenir BORT DorsoXpress 3.
- Le retrait supplémentaire de la corbeille pelvienne permet d'obtenir BORT DorsoXpress 2.
- Le retrait supplémentaire de la plaque dorsale permet d'obtenir BORT DorsoXpress 1.

COULEUR: ■ gris

## DX 3

REF 180630  
Pos.No.  
23.10.01.00.1



Orthèse de pontage servant à soulager la colonne lombaire avec fonction de mobilisation

- Hauteur : côté ventre 16 cm, côté dos 27 cm

Comme BORT DorsoXpress 2, avec en plus :

- Corbeille pelvienne, réglable en fonction de la taille
- Le retrait des corbeilles pelviennes permet d'obtenir BORT DorsoXpress 2
- Le retrait de la corbeille pelvienne et de la plaque dorsale permet d'obtenir BORT DorsoXpress 1.

COULEUR: ■ gris

## DX 2

REF 180620  
Pos.No.  
22.14.04.00.1



Orthèse lombaire avec fonction de mobilisation

- Hauteur : côté ventre 16 cm, côté dos 27 cm

Comme BORT DorsoXpress 1, avec en plus :

- Plaque dorsale servant d'élément de pontage pour la réduction de la lordose
- Le retrait de la corbeille pelvienne et de la plaque dorsale permet d'obtenir BORT DorsoXpress 1.

COULEUR: ■ gris

## DX 1

REF 180610  
Pos.No.  
22.14.02.00.1



Orthèse dorsale servant à stabiliser la colonne lombaire

- Bandage de base réglable individuellement pour 70 à 140 cm de tour de taille
- Structure innovante et légère de l'orthèse
- Réglage dosé de l'effet stabilisateur grâce à un système de palan demandant peu d'efforts
- Hauteur : côté ventre 16 cm, côté dos 20 cm
- Grandes poignées pour une manipulation facile
- Mise en place facilitée par une plaque de fermeture ergonomique

COULEUR: ■ gris


**Bandage de base  
en taille universelle  
(réglable)**



Bandage de base




Corbeille pelvienne

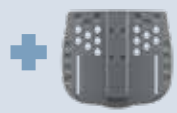

Élément dorsal  
inférieur



Élément dorsal  
supérieur

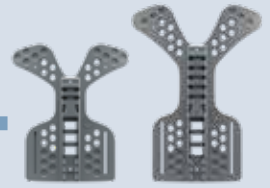

Élément de rallonge  
court/long




Bandage de base



Corbeille pelvienne



Élément dorsal  
inférieur

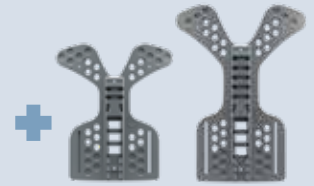

Élément de rallonge  
court/long

Démontable de DX 5, 6 à DX 4 (avec kit de démontage)




Bandage de base



Plaque dorsale



Corbeille pelvienne

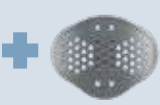

Plaque abdominale



**Avec  
possibilité de  
démontage**

Accessoires pour BORT DorsoXpress 5-6 :

**Kit de démontage BORT DorsoXpress**

REF 180690

- Accessoires complémentaires pour le démontage permettant d'obtenir BORT DorsoXpress 4, 3, 2
- Possibilité d'adaptation modulaire pour améliorer la mobilité au cours du traitement

Accessoires pour BORT DorsoXpress 1-6 :

**Kit de rallonge BORT DorsoXpress bandage de base**

REF 180695

- Pour les tours de taille de 130 à 160 cm



Bandage de base



Plaque dorsale



Corbeille pelvienne

Démontable de  
DX4 à DX3



Bandage de base



Plaque dorsale

Démontable de  
DX3 à DX2




Bandage de base

Démontable de  
DX2 à DX1

TAILLES BORT DORSOXPRESS 1-4

Tour de taille

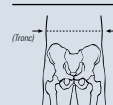

Une seule taille

70 - 140 cm

MODÈLE BORT DORSOXPRESS 5-6

Taille corporelle

court 155 - 170 cm

long 170 - 195 cm

Bandage de base pour un tour de taille de 70 à 140 cm (taille unique)

**NOUVEAU**

# BORT X-Walker AIR

Désormais également disponible dans la version très appréciée avec coussin d'air :  
gamme d'orthèses pour le traitement des blessures du pied et de la cheville



## Coussin d'air de grande taille

pour l'insertion exacte et la stabilisation de  
la région de la jambe inférieure et du pied

## BORT X-Walker AIR long

REF 101200

Pos.No. 22.03.03.00.1

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Orthèse servant à immobiliser la région de la jambe inférieure et du pied dans une position définie
- Modèle long avec un poids propre faible
- Design ergonomique et manipulation confortable, ainsi qu'ajustement grâce à un coussin d'air de grande surface dans la région de la jambe inférieure et du pied
- Semelle de soutien thérapeutique avec une très bonne propriété de déroulement
- Longueur du pied réglable grâce à l'étrier de protection des orteils ajustable

### MED-EXTRA

- Modèle long pour le bas de la jambe
- Réglage continu de la largeur au niveau du mollet

COULEUR : ■ gris

TAILLES (tous les BORT X-Walker AIR)	Pointures
small	35 – 40
medium	40 – 45
large	45 – 50

BBORT X-Walker AIR long/court : identique à droite et à gauche  
BORT X-Walker AIR Achillo : indiquer droite ou gauche



### BORT X-Walker AIR court

REF 101250

Pos.No. 22.03.03.00.1



### BORT X-Walker AIR Achillo

REF 101220

Pos.No. 23.02.01.00.1

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Orthèse servant à immobiliser la région de la jambe inférieure et du pied dans une position définie
- Version courte pour la jambe inférieure
- Coussin d'air de grande taille pour l'insertion exacte et la stabilisation du pied et de la jambe inférieure

COULEUR: ■ gris

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Orthèse de jambe inférieure et de pied permettant l'immobilisation dans une position définie et réglable
- Jeu de cinq talonnettes permettant d'ajuster la position thérapeutique en équin du pied
- Coussin d'air de grande taille pour l'insertion exacte et la stabilisation du pied et de la jambe inférieure

COULEUR: ■ gris

#### Pièces de rechange pour BORT X-Walker AIR



**Doublure de rechange BORT X-Walker AIR court**



**Doublure de rechange BORT X-Walker AIR long/Achillo**



**Jeu de talonnettes**

#### ⊕ Accessoires pour BORT X-Walker AIR



REF 100370  
**BORT sous-bas**



REF 100380  
**BORT housse de protection contre l'humidité**



REF 100390  
**BORT housse de protection pour la nuit**

**NOUVEAU**

## BORT Night Splint

Attelle de stabilisation dorsale pour l'immobilisation du pied

**Avec dispositif antibasculément latéral**



Dispositif antibasculémen



REF 100490 | Pos.No. 22.03.01.00.1

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Dispositif antibasculément latéral pour stabilisation dans l'axe requis
- Structure en coque légère et aérée

COULEUR: ■ noir

MED-EXTRA

- Sangles réglables de 0° à 10° d'extension dorsale
- Semelle antidérapante
- Rembourrage lavable
- Sangles rembourrées avec fermetures rapides

TAILLES	Pointures
small	35 – 38
medium	39 – 42
large	43 – 46

identique à droite et à gauche

Med

Med

NOUVEAU DESIGN

# BORT GenuXpress

Orthèses de genou à cadre encore plus faciles à manipuler et disponibles dans un noir élégant



Med




Med

## BORT GenuXpress

REF 100700 | Pos.No. 22.04.02.00.1


- Orthèse de genou à cadre selon le principe des 4 points pour le guidage et la stabilisation de l'articulation du genou

COULEUR: ■ noir 


## BORT GenuXpress ACL

REF 100800 | Pos.No. 23.04.01.00.1

- Orthèse de genou à cadre selon le principe des 4 points avec appareil tibial autoréglable pour le guidage et la stabilisation de l'articulation du genou

COULEUR: ■ noir 

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- BORT articulation à courbe polaire : basée sur le mouvement physiologique de roulement et de glissement de l'articulation du genou
- Extension réglable : 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25° et 30° 
- Flexion réglable : 0° (180°), 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75° et 90° 
- Haute résistance du cadre pour un poids propre faible
- Réglage sans outil de l'extension et de la flexion

### TAILLES



	Mesure f	Largeur du genou
small	39 – 47 cm	8,5 – 9,5 cm
<b>small plus</b>	47 – 54 cm	8,5 – 9,5 cm
medium	47 – 54 cm	9,5 – 10,5 cm
<b>medium plus</b>	54 – 61 cm	9,5 – 10,5 cm
large	54 – 61 cm	10,5 – 11,5 cm
<b>large plus</b>	61 – 68 cm	10,5 – 11,5 cm
x-large	61 – 68 cm	11,5 – 12,5 cm
<b>x-large plus</b>	68 – 75 cm	11,5 – 12,5 cm

Réutilisable après préparation par le fabricant

Veuillez indiquer droite ou gauche



Des tailles plus pour une gamme encore plus large



Basée sur le mouvement physiologique de roulement et de glissement de l'articulation du genou

Med

NOUVEAU DESIGN

# Modification de produit

BORT Generation orthèse dorsale avec plaque dorsale de 22 cm ou 27 cm de hauteur

NOUVEAU :  
plaque dorsale  
22 cm



Generation

## Generation orthèse dorsale

REF 215800 | Pos.No. 23.10.01.00.1

- Pour le soulagement de la colonne lombaire par la réduction de la lordose
- Hauteurs de la plaque dorsale : 22 cm ou 27 cm
- Système de palan demandant peu d'efforts



Generation

NOUVEAU DESIGN

# Modifications de produits


Changement de couleur : désormais disponible dans un gris élégant



Med

## BORT OmoStabil® gilet de Desault

REF 121200 | Pos.No. 22.09.01.00.1

- Nouvelle couleur : ■ gris 



Med

## BORT StabiloFix® correcteur de posture

REF 104600 | Pos.No. 22.09.05.00.1

- Nouvelle couleur : ■ gris 

Disponible également pour les enfants :


REF 104600 KIDS (seulement bleu)



Med

## BORT Stabilo® bracelet antiépicondylite avec soulagement ulnaire

REF 122580 | Pos.No. 22.08.06.00.1

- Nouvelle couleur : ■ gris 

Med

NOUVEAU DESIGN

## Modifications de produits

Genouillères avec nouveau système easyClick sans velcro



### **BORT Stabilo® genouillère avec articulation**

[REF] 150140 | Pos.No. 05.04.13.00.1

- La fixation et le réglage en longueur de la bande Stabilo® sont facilités par le système easyClick.



### **BORT genouillère avec articulation réglable**

[REF] 114460 | Pos.No. 05.04.13.00.1

- La fixation et le réglage en longueur de la bande Stabilo® sont facilités par le système easyClick.

⊕ 3 étapes pour un ajustement parfait : avec le système BORT easyClick



1. Ouvrir



2. Fixer



3. Fermer

Changement de couleur : orthèse textile soft désormais disponible dans un gris élégant



### **BORT Asymmetric® Plus**

[REF] 114900 | Pos.No. 22.04.01.00.1

- Filaments de correction de vecteur : système de bride innovant avec fils de correction intégrés dans le tricot pour un guidage personnalisable de la rotule.

- Couleur: ■ gris nouveau

NOUVEAU DESIGN

# Modifications de produits

Orthèse de levage du pied et de cheville avec équipement perfectionné



Med

## BORT orthèse de levage du pied

REF 054300 | Pos.No.22.03.05.00.1

- Teneur élevée en coton
- Particulièrement résistant au velcro



Med

## BORT Taloxpress

REF 053900 | Pos.No. 22.02.03.00.1

- Confort amélioré grâce à une sangle partiellement élastique

## Confort accru grâce à une nouvelle zone d'extension pour les bandages de cheville et du tendon d'Achille

Les chevillères BORT des séries Talostabil® et AchilloStabil disposent désormais d'une zone d'extension qui soulage la région du dos du pied grâce à l'élasticité longitudinale et transversale du tricot.

Exemple : BORT Talostabil® Eco



## Chevillères désormais dotées d'une zone d'extension



Med

## BORT Talostabil® Eco

REF 054600 | Pos.No. 05.02.12.00.1



select®

## BORT select Talostabil®

REF 054700 | Pos.No. 05.02.12.00.1



Sport

## BORT Talostabil® Sport

REF 054600SP | Pos.No. 05.02.12.00.1



Med

## BORT Talostabil® Eco Plus

REF 054650 | Pos.No. 05.02.14.00.1



select®

## BORT select Talostabil® Plus

REF 054100 | Pos.No. 05.02.14.00.1



Sport

## BORT Talostabil® Sport Plus

REF 054100SP | Pos.No. 05.02.14.00.1

## Chevillères du tendon d'Achille désormais dotées d'une zone d'extension



Med

## BORT AchilloStabil Eco

REF 054900 | Pos.No. 05.02.20.00.1



Sport

## BORT AchilloStabil Plus Sport

REF 053100SP | Pos.No. 05.02.20.00.1

NOUVEAU DESIGN

# Modifications de produits

Matériau optimisé pour les bandages, nouvelle répartition des tailles



## BORT Vario ceinture pour colostomie

REF 104010 | Pos.No. 29.01.01.00.1

- Nouveau matériau élastique pour bandages



## BORT bandage pour hernies cicatricielles

REF 104050 | Pos.No. 05.11.10.00.1

- Nouvelle répartition des tailles : small à x-large  
- Meilleure couverture de la circonférence




## BORT BORT bandage pour hernie ombilicale


REF 104070 | Pos.No. 05.11.10.00.1

- Nouvelle répartition des tailles : small à x-large  
- Meilleure couverture de la circonférence

Med


TAILLES	Tour de taille
 small	70 – 90 cm
medium	90 – 115 cm
large	115 – 150 cm

Indiquer la hauteur : 15 cm ou 22 cm

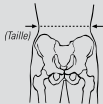TAILLES	Tour de taille
 small	60 – 80 cm
medium	80 – 100 cm
large	100 – 125 cm
x-large	125 – 150 cm

Autres tours de taille possibles sur mesure.

Indiquer la hauteur : 13 cm, 21 cm ou 26 cm

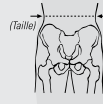TAILLES	Tour de taille
 small	60 – 80 cm
medium	80 – 100 cm
large	100 – 125 cm
x-large	125 – 150 cm

Autres tours de taille possibles sur mesure.

Hauteur 13 cm

NOUVEAU

# PediSoft® pansement tubulaire à gel

Pour la réduction de la pression sur les orteils et les doigts



REF 107050

- Coupable : la longueur est donc réglable individuellement  
- Longueur : 15 cm

TAILLE

Seulement une taille

OTC

⊕ Vous avez des questions ? N'hésitez pas à nous contacter : 031/822 05 45

Les solutions BORT répondent aux exigences et aux souhaits individuels. Nos collaborateurs et collaboratrices de l'Orthosan du service externe vous conseillent de manière exhaustive et compétente. Nous nous ferons un plaisir de convenir d'un rendez-vous personnel avec vous.

Toutes les informations sont fournies sans garantie ; sous réserve d'erreurs et de modifications.

**BORT. L'extra à votre côté.**

Orthosan AG | Freiburgstrasse 632 | 3172 Niederwangen b. Bern  
T 031 822 05 45 | www.orthosan.ch | info@orthosan.ch