


# NOVITÀ 2026



**Med**  
Nel segno  
di un viver  
sano

## BORT DorsoXpress

Una serie. Sei ortesi modulari. Diverse possibilità.

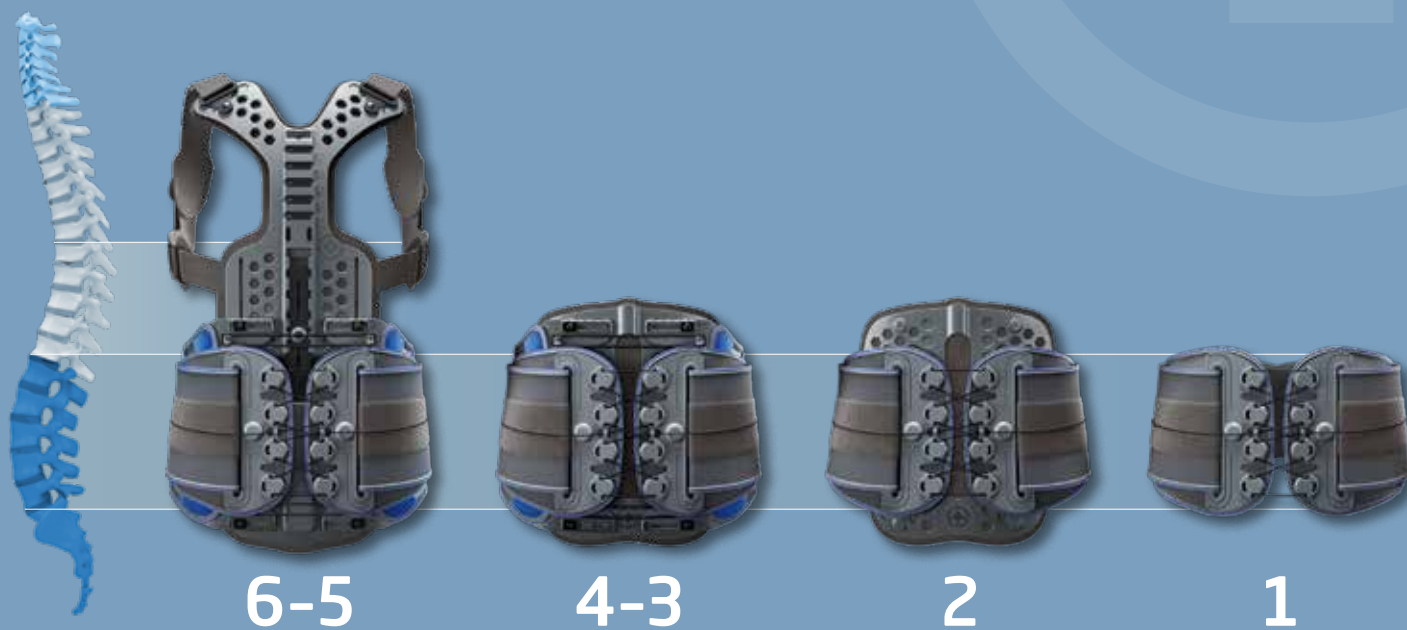

### BORT X-Walker AIR

Programma di ortesi con grande cuscino ad aria per la regione della gamba e del piede



### BORT Night Splint

Binario di posizionamento dorsale con protezione dall'inclinazione laterale



### BORT GenuXpress/ACL

Ortesi di ginocchio con articolazione a curva polare BORT: ora ancora più facili da usare



**BORT. L'extra al vostro fianco.**

**NUOVO**

# BORT DorsoXpress

Serie di ortesi dorsali modulari per il trattamento di un'ampia gamma di indicazioni

Con il DorsoXpress 1-6, BORT offre una serie di ortesi dorsali in sei parti con possibilità di smontaggio per il trattamento di patologie ortopediche della colonna vertebrale toracica e lombare.

## Il BORT DorsoXpress rende tutto più semplice

- + Supporto di base della serie in formato universale (regolabile)
- + Tutti i modelli di ortesi sono strutturati nello stesso modo per il loro uso
- + Hanno un peso ridotto
- + Facile apertura e chiusura
- + Supporto di regolazione per sostenere la regolazione del girovita

## Il BORT DorsoXpress favorisce il successo del trattamento


Migliore qualità delle cure, pazienti soddisfatti, adesione terapeutica elevata.

## MATERIALE AD ALTE PRESTAZIONI

- Elevata elasticità
- Infrangibile, resistente agli urti hanno e alle abrasioni
- Peso netto ridotto

## DESIGN ESAGONALE INNOVATIVO

- Aumenta la stabilità e la flessibilità
- Risparmia peso e consente la circolazione dell'aria

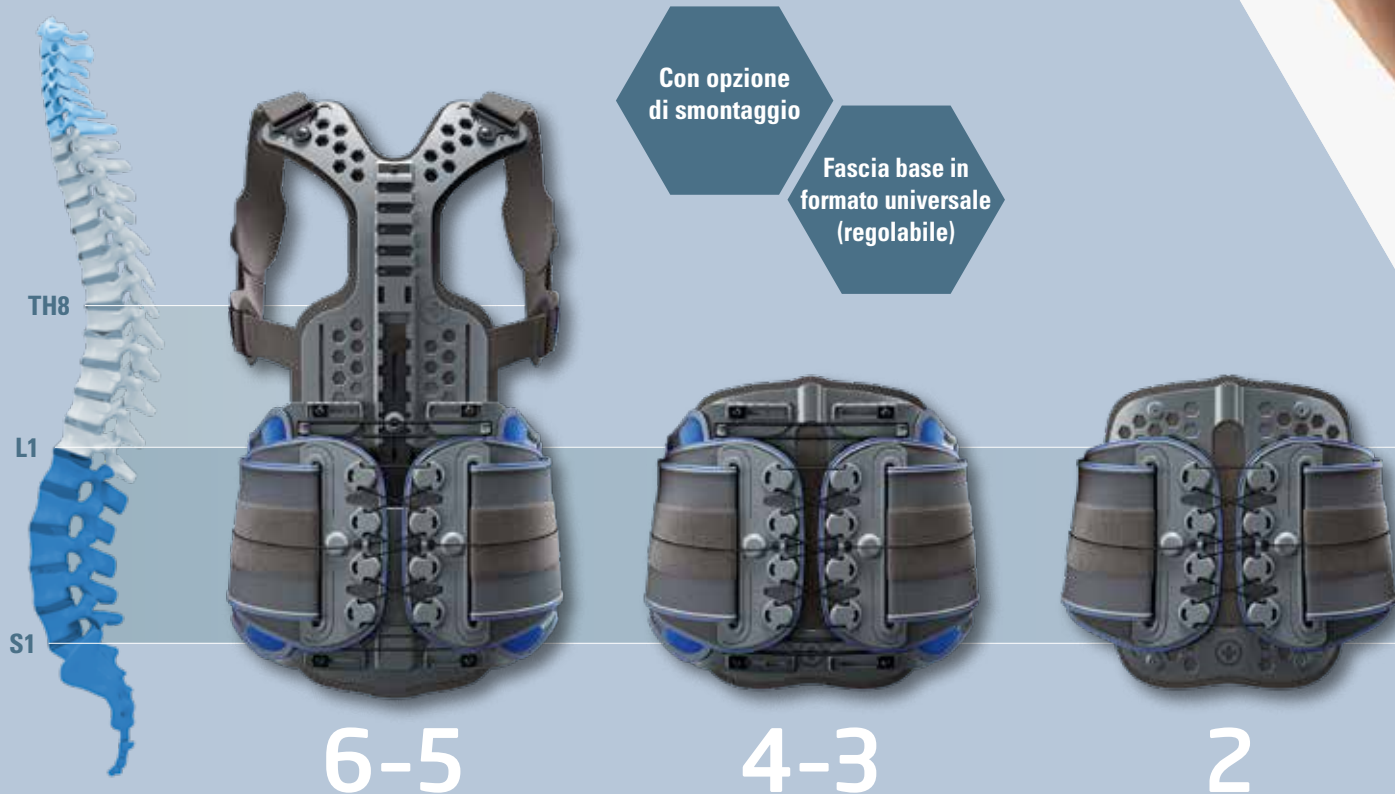

Med

DORSO

Ottima  
personalizzazione  
individuale -  
semplice e veloce



**BARRE STABILIZZATRICI IN ALLUMINIO FORMABILI A FREDDO**


- Regolazione degli elementi di ponte del rachide lombare e di estensione del rachide toracico

**CESTELLO PELVICO REGOLABILE IN VITA**

- Con aree dei bordi parzialmente flessibili per alleviare le strutture anatomiche critiche

**SISTEMA DI TRAZIONE A CORDA**

- Indossabile con facilità e vestibilità perfetta

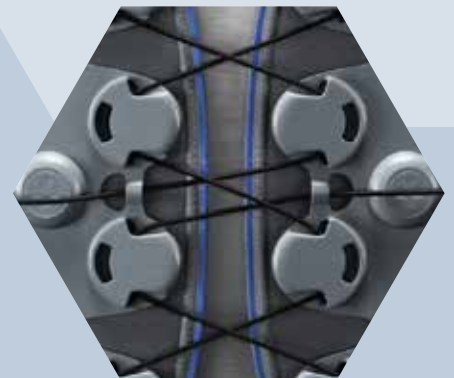

L'illustrazione mostra BORT DorsoXpress 5 o 6



1

XPRESS

**NUOVO**

# BORT DorsoXpress 1-6

Design modulare. Può essere smontato nel corso della terapia.

## DX 6

REF 180660  
Pos.No.  
23.10.01.00.1



Ortesi spinale per alleviare e correggere la colonna vertebrale lombare e toracica e limitare i movimenti sul piano sagittale/frontale con funzione di mobilizzazione

Come BORT DorsoXpress 5, in più:

- Elemento per la parte superiore della schiena per la mobilizzazione funzionale
- Può essere aggiornato a BORT DorsoXpress 4-2 solo con un kit di aggiornamento aggiuntivo

COLORE: ■ grigio

## DX 5

REF 180650  
Pos.No.  
23.10.01.00.1



Ortesi spinale per alleviare e correggere la colonna vertebrale lombare e toracica e limitare i movimenti sul piano

- Elemento di collegamento e allungamento per la colonna vertebrale lombare può essere modellato anatomicamente a freddo
- Cestello pelvico, vita regolabile
- Altezza: ventrale 16 cm
- Altezza: dorsale corta min. 45 - max. 54 cm / lunga min. 53 - max. 62 cm
- Può essere aggiornato a BORT DorsoXpress 4-2 solo con un kit di aggiornamento aggiuntivo

COLORE: ■ grigio

## DX 4

REF 180640  
Pos.No.  
23.10.01.00.1



Ortesi di flessione per il sollievo della colonna vertebrale lombare e per la rettilineizzazione della lordosi con funzione di mobilizzazione

- Altezza: ventrale 21 cm, dorsale 27 cm

Come BORT DorsoXpress 3, in più:

- Piastra addominale per il rinforzo della pressione
- Può essere convertito in BORT DorsoXpress 3 rimuovendo la piastra addominale
- Può essere convertito in BORT DorsoXpress 2 rimuovendo il cestello pelvico
- Può essere convertito in BORT DorsoXpress 1 rimuovendo la piastra dorsale

COLORE: ■ grigio

## DX 3

REF 180630  
Pos.No.  
23.10.01.00.1



Ortesi a ponte per il sollievo della colonna lombare con funzione di mobilizzazione

- Altezza: ventrale 16 cm, dorsale 27 cm

Come BORT DorsoXpress 2, in più:

- Cestello pelvico, vita regolabile
- Può essere convertito in BORT DorsoXpress 2 rimuovendo i cestelli pelvici
- Può essere convertito in BORT DorsoXpress 1 rimuovendo il cestello pelvico e la piastra dorsale

COLORE: ■ grigio

## DX 2

REF 180620  
Pos.No.  
22.14.04.00.1



Ortesi di sostegno lombare con funzione di mobilizzazione

- Altezza: ventrale 16 cm, dorsale 27 cm

Come BORT DorsoXpress 1, in più:

- Piastra dorsale come elemento di collegamento per la rettilineizzazione della lordosi
- Può essere convertito in BORT DorsoXpress 1 rimuovendo la piastra dorsale

COLORE: ■ grigio

## DX 1

REF 180610  
Pos.No.  
22.14.02.00.1



Ortesi per stabilizzare la colonna vertebrale lombare

- Supporto di base regolabile individualmente da 70 a 140 cm di circonferenza vita
- Design innovativo e leggero dell'ortesi
- Regolazione dosata dell'effetto di stabilizzazione grazie al sistema di trazione del cavo a risparmio di energia
- Altezza: ventrale 16 cm, dorsale 22 cm
- Ampie linguette di presa per una facile manipolazione
- Più facile da indossare grazie alla piastra di chiusura ergonomica

COLORE: ■ grigio

Fascia base in formato universale (regolabile)



Fascia base




Cestello pelvico



Elemento per la parte inferiore della schiena



Elemento per la parte superiore della schiena

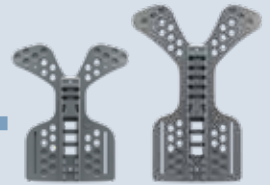

Elemento di estensione corto/lungo




Fascia base



Cestello pelvico




Elemento per la parte inferiore della schiena

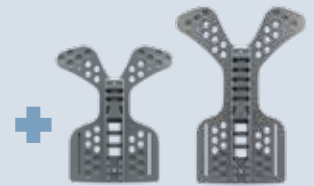

Elemento di estensione corto/lungo




Fascia base

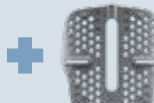

Piastra dorsale



Cestello pelvico

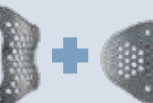

Piastra addominale

Smontabile da DX 5, 6 a DX 4 (con kit di smontaggio)



Con opzione di smontaggio

Accessori per BORT DorsoXpress 5-6:

**Set BORT DorsoXpress**

REF 180690

- Accessori supplementari per impalcature per BORT DorsoXpress 3, 2, 1
- Possibilità di personalizzazione modulare per aumentare la mobilità durante la terapia

Accessori per BORT DorsoXpress 1-6:

**BORT Set di ampliamento DorsoXpress Fascia base**

REF 180695

- Per circonferenze corporee da 130 a 160 cm



Fascia base



Piastra dorsale



Cestello pelvico

Smontabile da DX 4 a DX 3



Fascia base



Piastra dorsale

Smontabile da DX 3 a DX 2




Fascia base

Smontabile da DX 2 a DX 1

BORT DORSOXPRESS 1-4 Dimensioni del ventre

Una sola taglia \_\_\_\_\_ 70 - 140 cm

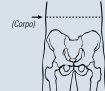

MODELLO BORT DORSOXPRESS 5-6 Misure del corpo

corto \_\_\_\_\_ 155 - 170 cm  
lungo \_\_\_\_\_ 170 - 195 cm

Fascia base per 70 - 140 cm di circonferenza vita (taglia unica)

**NUOVO**

# BORT X-Walker AIR

Ora disponibile anche nella famosa versione con cuscino ad aria:  
Programma di ortesi per il trattamento delle lesioni del piede e della caviglia

## Cuscino ad aria di grandi dimensioni

per l'incorporazione e la stabilizzazione della parte inferiore della gamba e del piede

## BORT X-Walker AIR lungo

REF 101200

Pos.No. 22.03.03.00.1

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Ortesi per l'immobilizzazione della regione inferiore della gamba/del piede in una posizione predeterminata
- Lunga e poco pesante
- Design ergonomico e comodo utilizzo e regolazione grazie all'ampio cuscino ad aria nella parte inferiore della gamba e nella area dei piedi
- Suola di supporto alla terapia con ottime proprietà di rotolamento
- Lunghezza del piede regolabile grazie alla barra di protezione della punta regolabile

### IL FATTORE MED-PLUS

- Versione lunga sulla parte inferiore della gamba
- Regolazione continua della larghezza nella zona del polpaccio

COLORE : ■ grigio

TAGLIE (tutte le BORT X-Walker AIR)	Numero di scarpe
small	35 – 40
medium	40 – 45
large	45 – 50

BORT X-Walker AIR lungo/corto: uguale per destra e sinistra  
BORT X-Walker AIR Achillo: **specificare destra o sinistra**



### BORT X-Walker AIR corto

REF 101250

Pos.No. 22.03.03.00.1



### BORT X-Walker AIR Achillo

REF 101220

Pos.No. 23.02.01.00.1

#### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Ortesi per l'immobilizzazione della regione inferiore della gamba/ del piede in una posizione predeterminata
- Versione corta sulla parte inferiore della gamba
- Ampio cuscino d'aria per l'inserimento e la stabilizzazione del piede e della parte inferiore della gamba

COLORE: ■ grigio

#### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Ortesi gamba-piede per l'immobilizzazione in posizione definita e regolabile
- Set di cunei per talloni a cinque livelli per regolare la posizione terapeutica del piede a punta
- Ampio cuscino d'aria per l'inserimento e la stabilizzazione del piede e della parte inferiore della gamba

COLORE: ■ grigio

#### Pezzi di ricambio per BORT X-Walker AIR



**Pezzi di ricambio per BORT X-Walker AIR corto**



**Fodera di ricambio BORT Fodera di ricambio X-Walker AIR lungo / Achillo**



**Set di cunei per tallone**

#### ⊕ Accessori per BORT X-Walker AIR



REF 100370  
**BORT Calze sotto-pantalone**



REF 100380  
**Coperchio di protezione dall'umidità**



REF 100390  
**Copertura protettiva BORT per la notte**

**NUOVO**

## BORT Night Splint

Stecca di posizionamento dorsale per l'immobilizzazione del piede

**Situazione di stoccaggio con protezione dall'inclinazione laterale**



Dispositivo antiribaltamento



REF 100490 | Pos.No. 22.03.01.00.1

#### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Protezione dall'inclinazione laterale per uno stoccaggio più agevole per l'asse
- Struttura a guscio ventilata e leggera

COLORE: ■ nero

#### IL FATTORE MED-PLUS

- Cinghie regolabili da 0° a 10° di estensione dorsale
- Suola antiscivolo
- Tappezzeria lavabile
- Cinghie imbottite con chiusure a sgancio rapido

#### TAGLIE

Numeri di scarpa

small	35 – 38
medium	39 – 42
large	43 – 46

destra e sinistra uguali

Med

Med

NUOVO DESIGN

# BORT GenuXpress

Ortesi per ginocchia ancora più facili da maneggiare e in nero di alta qualità



Med




Med

## BORT GenuXpress

REF 100700 | Pos.No. 22.04.02.00.1


- Ortesi a telaio per ginocchio secondo il principio dei 4 punti di appoggio per guidare e stabilizzare l'articolazione del ginocchio

COLORE: ■ nero 



## BORT GenuXpress ACL

REF 100800 | Pos.No. 23.04.01.00.1

- Ortesi a telaio per ginocchio secondo il principio dei 4 punti con **supporto tibiale autoregolabile** per la guida e la stabilizzazione dell'articolazione del ginocchio

COLORE: ■ nero 

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Articolazioni a curve polari BORT: basato sul movimento di rotazione-slittamento dell'articolazione del ginocchio
- Estensione regolabile: 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25° e 30° 
- Flessione regolabile: 0° (180°), 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75° e 90° 
- Elevata resistenza del telaio con basso peso morto
- Regolazione senza attrezzi dell'estensione e della flessione

### TAGLIE



	Taglia f	Larghezza del ginocchio
small	39 – 47 cm	8,5 – 9,5 cm
<b>small plus</b>	47 – 54 cm	8,5 – 9,5 cm
medium	47 – 54 cm	9,5 – 10,5 cm
<b>medium plus</b>	54 – 61 cm	9,5 – 10,5 cm
large	54 – 61 cm	10,5 – 11,5 cm
<b>large plus</b>	61 – 68 cm	10,5 – 11,5 cm
x-large	61 – 68 cm	11,5 – 12,5 cm
<b>x-large plus</b>	68 – 75 cm	11,5 – 12,5 cm

Pronto per l'uso dopo il ritrattamento da parte del produttore

specificare destra o sinistra



Taglie maggiorate per una gamma ancora più ampia di allestimenti



Articolazioni a curve polari basato sul movimento di rotazione-slittamento dell'articolazione del ginocchio

Med

NUOVO DESIGN

## Modifica del prodotto

Ortesi dorsale BORT Generation con piastra dorsale alta 22 o 27 cm

NUOVO:  
Piastra dorsale  
22 cm



Generation

### Generation ortesi per la schiena

REF 215800 | Pos.No. 23.10.01.00.1

- Per alleggerire la colonna vertebrale lombare mediante la de-lordosi
- Altezza piastra dorsale: 22 cm o 27 cm
- Sistema di trazione a corda per un'applicazione senza sforzo
- Il cestello pelvico si adatta alla vita



Generation

NUOVO DESIGN

## Modifiche al prodotto



Cambio di colore: ora in un grigio elegante



Med

### Gilet BORT OmoStabil® Desault

REF 121200 | Pos.No. 22.09.01.00.1

- Nuovo colore:  grigio 



Med

### BORT StabuloFix® Correttore posturale

REF 104600 | Pos.No. 22.09.05.00.1

- Nuovo colore:  grigio 

Disponibile anche per bambini:


REF 104600 KIDS (solo blu)



Med

### Tutore per epicondilita BORT Stabulo® con scarico ulnare

REF 122580 | Pos.No. 22.08.06.00.1

- Nuovo colore:  grigio 

Med

NUOVO DESIGN

## Modifiche al prodotto

Ginocchiere con il nuovo sistema easyClick senza velcro



### BORT Stabilo® Ginocchiera con articolazione mobile

REF 150140 | Pos.No. 05.04.13.00.1

- Fissaggio semplice e regolazione della lunghezza della cinghia Stabilo con il sistema easyClick®



### BORT Ginocchiera con articolazione regolabile

REF 114460 | Pos.No. 05.04.13.00.1

- Fissaggio semplice e regolazione della lunghezza della cinghia Stabilo con il sistema easyClick®

⊕ Vestibilità perfetta in 3 passi: con il sistema BORT easyClick



1. Aprire



2. Fissare




3. Chiudere

Cambio di colore: ortesi morbida in tessuto ora in un elegante grigio



### BORT Asymmetric® Plus

REF 114900 | Pos.No. 22.04.01.00.1

- Filamenti di correzione vettoriali: innovativo sistema di rinforzo con filamenti di correzione che attraversano il tessuto a maglia per una guida individuale della rotula  
- Colore: ■ grigio 

NUOVO DESIGN

## Modifiche al prodotto

Sottopiede e ortesi per articolazione del piede con caratteristiche avanzate



### BORT Orttesi dinamico per la flessione dorsale del piede

REF 054300 | Pos.No. 22.03.05.00.1

- Alto contenuto di cotone
- Particolarmente resistente al velcro



### BORT TaloXpress

REF 053900 | Pos.No. 22.02.03.00.1

- Migliore comfort grazie al cinturino parzialmente elasticizzato

### Maggiore comfort grazie alla nuova zona elastica per il supporto della caviglia e del tendine d'Achille

Le cavigliere BORT delle serie TaloStabil® e AchilloStabil sono ora dotate di una zona elastica di sollievo nella parte posteriore del piede grazie all'elasticità longitudinale e trasversale del tessuto a maglia.

Illustrazione d'esempio: BORT TaloStabil® Eco



### Benda per l'articolazione del piede ora con zona elastica



### BORT TaloStabil® Eco

REF 054600 | Pos.No. 05.02.12.00.1



### BORT select TaloStabil®

REF 054700 | Pos.No. 05.02.12.00.1



### BORT TaloStabil® Sport

REF 054600SP | Pos.No. 05.02.12.00.1



### BORT TaloStabil® Eco Plus

REF 054650 | Pos.No. 05.02.14.00.1



### BORT select TaloStabil® Plus

REF 054100 | Pos.No. 05.02.14.00.1



### BORT TaloStabil® Sport Plus

REF 054100SP | Pos.No. 05.02.14.00.1

### Benda per per il tendine d'Achille ora con zona elastica



### BORT AchilloStabil Eco

REF 054900 | Pos.No. 05.02.20.00.1



### BORT AchilloStabil Plus Sport

REF 053100SP | Pos.No. 05.02.20.00.1

NUOVO DESIGN

## Modifiche al prodotto

Materiale per bendaggi ottimizzato, nuova distribuzione delle dimensioni




### BORT Vario Bendaggio per stoma Vario

REF 104010 | Pos.No. 29.01.01.00.1


- Nuovo materiale elastico per bende

TAGLIA circonferenza vita piccola

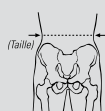

small	70 – 90 cm
medium	90 – 115 cm
large	115 – 150 cm

Specificare l'altezza 15 cm o 22 cm

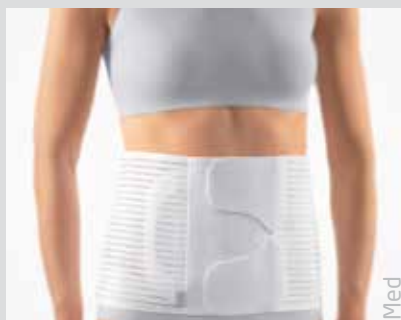


### BORT Fascia per ernia da cicatrice

REF 104050 | Pos.No. 05.11.10.00.1

- Nuove taglie da small a x-large
- Migliore copertura del perimetro

TAGLIA  circonferenza vita piccola

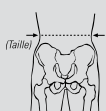

small	60 – 80 cm
medium	80 – 100 cm
large	100 – 125 cm
x-large	125 – 150 cm

Si possono personalizzare altre taglie.

Specificare l'altezza 13 cm, 21 cm o 26 cm




### BORT Fascia per ernia ombelicale

REF 104070 | Pos.No. 05.11.10.00.1

- Nuove taglie da small a x-large
- Migliore copertura del perimetro

TAGLIA  circonferenza vita piccola

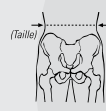

small	60 – 80 cm
medium	80 – 100 cm
large	100 – 125 cm
x-large	125 – 150 cm

Si possono personalizzare altre taglie

Altezza 13 cm

Med

NUOVO

## PediSoft® Benda tubolare in gel

Per alleviare la pressione su dita dei piedi e delle mani



REF 107050

- Può essere tagliato a misura, quindi la lunghezza può essere personalizzata
- Lunghezza 15 cm

TAGLIA

Una sola taglia

OTC

⊕ Avete altre domande? Chiamateci allo 031/822 05 45

Le soluzioni BORT soddisfano le esigenze e i desideri individuali. I nostri rappresentanti Orthosan vi forniranno una consulenza completa e competente. Saremo lieti di fissare un appuntamento personale con voi.

Tutte le informazioni sono prive di garanzia, salvo errori e modifiche.

**BORT. L'extra al vostro fianco.**

Orthosan AG | Freiburgstrasse 632 | 3172 Niederwangen b. Bern  
T 031 822 05 45 | www.orthosan.ch | info@orthosan.ch